



Catalana  
Dental  
[www.catalanadental.com](http://www.catalanadental.com)

93 219 63 04  
682 615 950  
[www.catalanadental.com](http://www.catalanadental.com)

## Freses per cirurgia



**DFS**  
Dental Future Systems  
**D I A M O N**

## Cirurgia: fresas per os d'acer inoxidable

(segons Dr. Lindemann)

Velocitat

FG - 100000 rpm / tpm

CA - 40000 rpm / tpm

PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 330 ...

figura / forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl

408
016
295
10

315 FG L

Typ 161

**111613**

205 CA L

Typ 161

**111614**

ISO Nr.: 500 ...

figura / forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl

412
022
297
9

315 FG L

Typ 161

205 CA L

Typ 161

**111675**

ISO Nr.: 330 ...

figura / forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl

407
014
297
9

315 FG L

Typ I

**110013**

205 CA L

Typ 163

**111634**

407
018
297
8

Typ 164

**111644**

407
022
297
9

Typ 165

**111654**

ISO Nr.: 330 ...

figura / forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl

408
016
297
10

315 FG L

Typ 162

**111623**

205 CA L

Typ 162

**111624**

104 PM

Typ 162

**111622**

Typ II

408
016
297
10

**110023**



## Cirurgia: fresas per os en acer inoxidable trempat

(segons Prof. Dr. Lindemann)

Velocitat FG - 100000 rpm / tpm  
CA - 40000 rpm / tpm  
PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 330 ...

figura/forma	410	410	407
Ø 1/10 mm	016	020	022
dentat	297	297	297
KL/hl	12	12	12

315 FG L Typ III **110033**

205 CA L Typ 166 **111664**

104 PM Typ 166 **111662**

Typ 167 **111674**

## Cirurgia: fresas per os en carbur de tungstè

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma	001	001	001	001	001
Ø 1/10 mm	027	031	035	040	050
dentat	291	291	291	291	291
KL/hl	-	-	-	-	-

205 CA L **110115**

104 PM **110120**

**110116**

**110121**

**110117**

**110118**

**110119**

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma	001	170	001	170
Ø 1/10 mm	023	016	023	016
dentat	006	296	006	008
KL/hl	-	5,5	-	4,5

104 PM **111197**

**111198**

**117023XL**

**109316XL**

**New**

**New**



## Cirurgia: fresas per os en carbur de tungstè




ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
Ø 1/10 mm  
dentat  
KL/hl

### Velocitat

FG - 100000 rpm / tpm  
CA - 40000 rpm / tpm  
PM - 40000 rpm / tpm

Les fresas per os venen empaquetades en presentacions de 2 peces.  
Figura = forma ISO. KL= longitud del cap en mm.

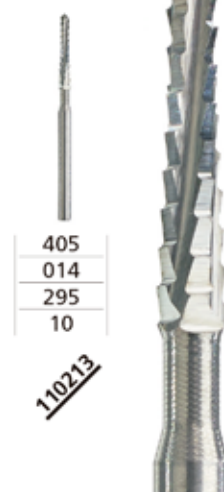

205 CA L

104 PM

110213

Carboss/  
Carboss



ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
Ø 1/10 mm  
dentat  
KL/hl

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
Ø 1/10 mm  
dentat  
KL/hl



315 FG L

Typ C168

110093

205 CA L

104 PM

111098

111097

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
Ø 1/10 mm  
dentat  
KL/hl mm

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
Ø 1/10 mm  
dentat  
KL/hl mm



205 CA L

Typ C 687

111200

315 FG L

Typ CB 255A

316 FG XL

Typ CB 255A

204 CA

Typ CB 255A



111413

111423

111414



# Cirurgia: fresas per os en carbur de tungstè

## Velocitat

FG - 100000 rpm / tpm  
 CA - 40000 rpm / tpm  
 PM - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl mm

219
015
295
9

314 FG Typ C 152

110125

316 FG XL Typ C 152

110123

204 CA Typ C 152

110124

ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl mm

210
015
295
11

316 FG XL Typ C 151

110113

205 CA L Typ C 151

110114



ISO Nr.: 500 ...

figura/forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl mm

409	409	410
021	023	023
297	297	297
9	9	9

204 CA

110094

205 CA L

110095

104 PM

110096



415	415	415
018	021	023
296	296	296
5,2	5,2	5,2

121718

121721

121723

Les fresas per os venen empaquetades en presentacions de 2 peces.  
 Figura = forma ISO. KL= longitud del cap en mm.



**Kit fresas per os**  
 ref. per comanda: 800211






- \* Contingut:
- 110094 (1 peça)
- 110095 (1 peça)
- 110096 (1 peça)
- 111675 (1 peça)



## DIADOSS: fresas para hueso diamantadas de acero inoxidable

Fresa per os diamantada per aplicacions en cassos extrems.

Velocitat  
 FG -100000 rpm / tpm  
 CA - 40000 rpm / tpm

ISO Nr.: 330 ...					
figura / forma	411	411	411	411	411
Ø 1/10 mm	018	021	016	018	021
KL/hl mm	12	12	11	11	11
Unitats capsa	2	2	2	2	2
205 CA L	<u>121614</u>	<u>121624</u>	315 FG L	<u>121613</u>	<u>121623</u>
				<u>121633</u>	

## Fresas per endodòncia / cavitats d'accés




ISO Nr.: 506 ...

Velocitat  
 FG -100000 rpm / tpm



figura / forma  
 Ø 1/10 mm  
 dentat  
 KL/hl mm

316 FG XL  
 Typ C 389

		
315	315	315
012	014	018
006	006	006
9	9	9
<u>116110</u>	<u>116112</u>	<u>116122</u>



Part activa de carbur amb dentat.

Revestiment adiamantat.

Fresa de carbur adiamantada per endodòncia / cavitats d'accés.

ISO Nr.: 806 ... 534 grueso / gros

Velocitat  
 FG -300000 rpm / tpm



figura / forma  
 Ø 1/10 mm  
 KL/hl mm

313 FG màneg curt

316 FG XL

	
219	494
014	018
9	10
<u>538165</u>	<u>538275</u>

Fresas adiamantades.

## Bisturí circular per a teixit tou / Tissue punches

Aplicació:

Per tallar / trepanar teixit tou en el camp de la implantologia i sense penjoll

ISO Nr.: 330 204 F 315

Velocitat

2' - 4000 rpm / tpm



figura num. / forma	478	478	478
l 1/10 mm	035	040	050
Contingut envàs	1	1	1

204 CA

**111240**

**111250**

**111260**



## PreciCut® Soft Tissue Trimmer

La punta del tallador està fabricada amb òxid de zirconi estabilitzat amb itri.

### DFS PreciCut®


Els talladors de teixit tou de precisió PreciCut® s'insereixen a la turbina igual que una fresa. Si us plau operar a alta velocitat: 300000 rpm.

L'eficàcia de tall és com un tall de bisturí però més precís. **No es requereix refrigeració per aigua.**


PreciCut® han de ser aplicats en un angle de 90 ° cap a la superfície gingival, únicament amb lleugera pressió. L'extrem de l'instrument s'escalfa ràpidament a causa de la fricció amb el teixit, el resultat és una coagulació de teixit immediata i sagnant el mínim, **sempre i quan vostè treballi sense aigua refrigerant!**

L'instrument és altament resistent a ruptura i aguanta pressió. L'extrem actiu i la superfície no es desfila garantint una vida útil de molts anys.

Recomanem una existència mínima de 2 talladors de teixit per al seu consultori, pel fet que un ha de reesterilitzar-se després de cada contacte amb un pacient abans de poder reutilitzar-se.

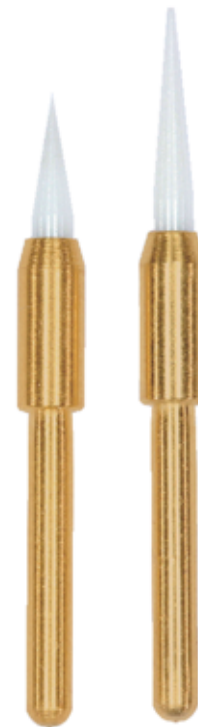

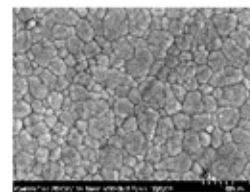

Estructura de ceràmica



ISO Nr.: 005315...

PreciCut®      PreciCut® Long

		
núm. fig. / forma	164	164
Ø 1/10 mm	015	015
KU/hl	5	8
Quantitat per capsula	1	1
	